

#### Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE					
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION				
Dirección	SAN MARTIN n° 1580, CONCEPCION				
Contacto	JORGE FIGUEROA				
Correo	jfigueroa@ssconcepcion.cl				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO					
Equipo	Ventilador Mecanico				
Marca	Philips Respironics				
Modelo	Trilogy 100				
Serie	TV112010957				
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA					
OT - ACT	121764	H Hombre		3 Horas	
Cobertura	Contrato			11:30	
Tipo de asistencia	FC0			15:30	
Fecha	28-03-2024	O.C(Opcional)			
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN					
Ingeniero	Ignacio Gamboa				
FALLA REPORTADA POR CLIENTE					
Otros					
Otros					
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA					
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION		
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas		Reemplazo de repuesto		
Otros:	Otros:		Otros:		
ORSERVACION GENERAL					

### **OBSERVACION GENERAL**

Equipo hace ingreso a laboratorio para aplicación de FCO, al igual que el equipo con numero serial TV112010986 presenta marcas en su mica, indicando un problema en ella. Se realizan cambios de piezas involucradas en el proceso, se aplican pruebas donde presenta fallas, donde al realizarse una inspección interna no presenta conexión entre el porting block y la tarjeta de sensores la cual se normaliza, de igual forma no presenta filtro de micrones.

Realizada la normalización se aplican pruebas de funcionamiento, pasando satisfactoriamente las pruebas. Por otro lado, el equipo presenta los siguientes datos:


- Horas de funcionamiento: 1327,3 horas
- Horas de funcionamiento Rubina: 38268,2/30000 horas de funcionamiento requiriendo un cambio de esta.
- Versión de software 14.2.02, actualiza a la versión 14.2.05



#### Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

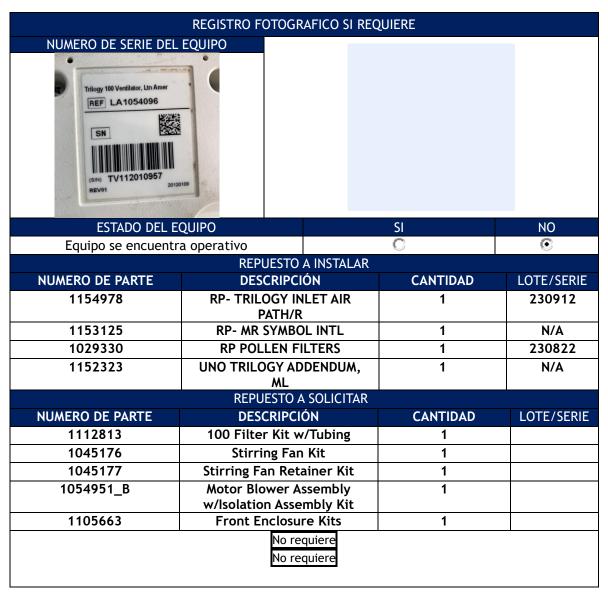



## Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

Foundard		
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	