

Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE				
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION			
Dirección	SAN MARTIN n°1580, CONCEPCION			
Contacto	JORGE FIGUEROA			
Correo	jfigueroa@ssconcepcion.cl			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO				
Equipo	Ventilador Mecanico			
Marca	Philips Respironics			
Modelo	Trilogy 100			
Serie	TV112010986			
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA				
OT - ACT	121762	H Hombre	1 Hora	
Cobertura	Contrato	H inicio 08:30		
Tipo de asistencia	FCO	H termino 11:30		
Fecha	28-03-2024	O.C(Opcional)		
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN				
Ingeniero	Ignacio Gamboa			
FALLA REPORTADA POR CLIENTE				
Otros				
Otros				
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA				
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION		
Otros:	Otros:	Otros:		
OBSERVACION GENERAL				

OBSERVACION GENERAL

Equipo ingresa a laboratorio, se realiza inspección visual equipo presenta marcas en las pantallas, las cuales se corrigieron manipulando la mica de la pantalla, pero presenta sensación de falla en la estructura de la mica. Por otro lado, presenta desconexión de maguera

entre porting block y tarjeta de sensores, también tiene ausencia de filtro de micrones entre módulo de exhalación activa y tarjeta de sensores.

Se realiza proceso de FCO, equipo pasa todas pruebas sin problemas, el equipo presenta los siguientes datos:

- Horas de funcionamiento: 102,4 horas
- Horas de funcionamiento turbina: 24723,9/30000 horas
- Versión de software 14.2.04, se actualiza 14,2,05


Equipo queda disponible.



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

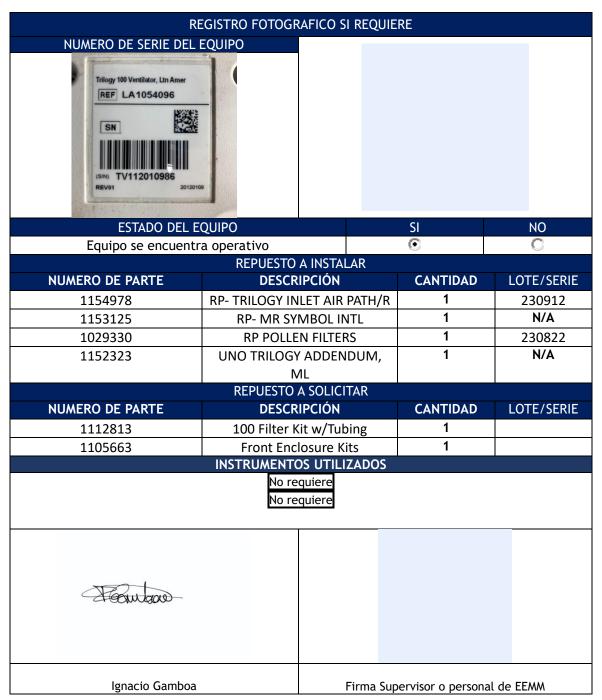



Andover Alianza Médica S.A.

Av. Cristóbal Colón N° 8570, Las Condes, Santiago. Fono: +562 2 4780000 contacto@andover.cl

F-07-03-01/ Rev. 00

INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Nombre de Supervisor o personal EEMM
	Institución