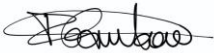


ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.		
Dirección	EZEQUIAS ALLENDE N° 2345, PROVIDENCIA		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Vnetilador		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV113102301		
Software	14.2.04	Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	120036	H Hombre	2 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	10:30
Fecha	12-02-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Alarma de equipo			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio informando errores 290 (requiere servicio técnico) y 106 (problemas con el parlante 1), se realiza inspección visual sin encontrar desperfectos visuales, se realiza actualización de software a la versión 14.2.05.</p> <p>Se realiza desarme e inspección interna del equipo si encontrar desperfectos en el conexionado de los cables de audio, se encuentra presencia de material particulado en el tubo de transición, se realiza limpieza de contactos de parlante, se realiza armado y montaje, se realizan pruebas en banco sin presentar fallas. Equipo queda disponible. Su turbina cuenta con 10757,9 horas de trabajo. Se recomienda cambio del tubo de transición y realización de un mantenimiento preventivo del equipo.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE		
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO		
		
		
		
ESTADO DEL EQUIPO		
	SI	NO

Equipo se encuentra operativo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1045154	Transition Tube Kit	1	
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	